

CATÁLOGO

ANVISA: 10245230025

SYLIX

LIP - 2401

O SYLIX é um equipamento emissor de laser, do tipo Q-Switched de ND:Yag, com **potência de 1.000mJ**, destinado a auxiliar na remoção e clareamento e pigmentos exógenos como tatuagens e micropigmentação.




ALTA
POTÊNCIA



FÁCIL
PROGRAMAÇÃO



TRÊS OPÇÕES
DE PONTÉIRAS

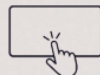

DISPLAY TOUCH
INTUITIVO

PONTEIRAS

O SYLIX possui três ponteiros permitindo atuação em pigmentos escuros, claros, monocromáticos e coloridos.



532 nm: indicada para remoção de pigmentos mais claros, como tatuagens coloridas, assim como lesões pigmentadas superficiais.



1064 nm: Indicada para a remoção de pigmentos mais profundos, como as tatuagens escuras e lesões pigmentadas mais profundas



1320 nm: Indicada para o procedimento de Black Peel, acne e peles lipídicas, além de penetrar de maneira mais profunda na pele, atingindo as camadas da derme e estimulando a produção de colágeno.

Aplicabilidades estéticas

- Remoção de tatuagem, pigmentos exógenos, micropigmentação
- Rejuvenescimento
- Black Peel

Aplicador

Aplicador leve e ergonômico facilitando o atendimento e com emissão de 3 frequências.



Case Funcional

Case funcional que protege seu equipamento durante o transporte e funciona como base de apoio para o equipamento.




Maleta Rígida

Feita para proteção e transporte do aplicador e acessórios.



ENDOPHOTON LITE 660 NM

ANVISA: 10245239026

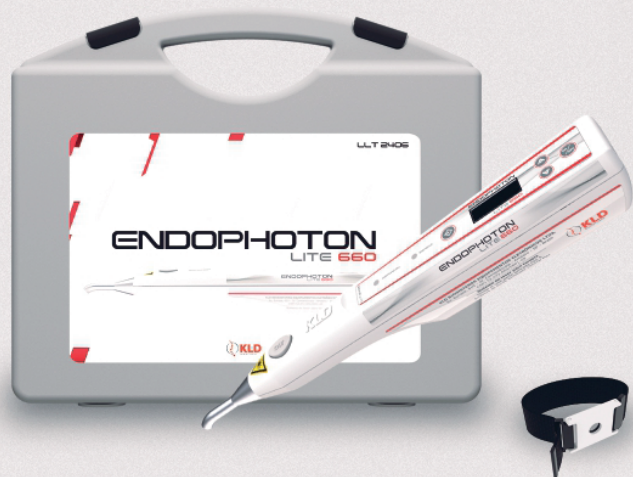

Comprimento de onda mais superficial, atingindo principalmente derme papilar e reticular.

Potência de 150mW

Aplicabilidades:

- Estética
- Fonoaudiologia
- Odontologia
- Podologia

Acompanha Pulseira Fotobiomodulação Transcutânea

ENDOPHOTON LITE 808 NM

ANVISA: 10245239026



Atinge maior profundidade que o laser vermelho.

Potência de 150mW

Aplicabilidades:

- Reabilitação
- Fonoaudiologia
- Podologia
- Odontologia

Acompanha Pulseira Fotobiomodulação Transcutânea e Kit Toposcopia.

ENDOPHOTON LITE 904 NM

ANVISA: 10245239026



Maior profundidade entre os comprimentos de ondas disponíveis.

Potência de 100mW

Aplicabilidades:

- Reabilitação
- Odontologia
- Fonoaudiologia
- Podologia

Acompanha Pulseira Fotobiomodulação Transcutânea e Kit Toposcopia.

ENDOPHOTON LITE 660 + 808 NM

ANVISA: 10245239026



Apresenta os dois comprimentos de onda na mesma caneta.

Potência de 150mW

Aplicabilidades:

- Estética
- Fonoaudiologia
- Podologia
- Odontologia
- Reabilitação

Acompanha Pulseira Fotobiomodulação Transcutânea e Kit Toposcopia.

ANVISA: 10245239023

MANTHUS

EVOLUTION

EUS 2305

O equipamento de terapia combinada (ultrassom + correntes) mais renomado do mercado da estética está de volta com design renovado e funcionalidades avançadas, prontos para elevar os resultados dos tratamentos a um novo patamar.




MAIOR POTÊNCIA
DO MERCADO
90W



TRATAMENTOS
CORPORAIS E FACIAIS



8 CANAIS

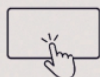

DISPLAY TOUCH
7"



PROTOCOLOS
PRONTOS

APLICADORES



Aplicador Facial

Potência: 3W
Frequências: 1 e 3 MHz
ERA: 1 cm²



Aplicador Corporal (Pequenas Áreas)

Potência: 9W
Frequências: 1 e 3 MHz
ERA: 3 cm²



Aplicador de 40K

Potência: 80W
ERA: 20 cm²



Aplicador Corporal (Grandes Áreas)

Potência: 90W
Frequências: 1 e 3 MHz
ERA: 30 cm²

Tratamentos

- Gordura Localizada
- Celulite
- Remodelagem Corporal
- Lipedema
- Pós-operatório de Cirurgia Plástica
- Pré e Pós-Criolipólise
- Analgesia

Modos de Operação

- Ultrassom
- Estereodrenagem
- Terapia Combinada
- Terapia Simultânea
- Eletroestimulação

Modo Power Pulse

Uma tecnologia exclusiva da KLD que modula em 40KHz as frequências de 1 e 3 MHz permitindo maior profundidade e amplitude máxima nos tratamentos.

Ultrassom

- Frequências de 1 e 3 MHz
- Ultrassom de Baixa Frequência de 40KHz
- Ultrassom Facial de 1 e 3 MHz

Exclusividade

- Corrente Estereodinâmica®

Exclusiva corrente desenvolvida pela KLD, para estimular o sistema linfático, fazendo uma verdadeira drenagem linfática eletrônica.

Correntes

- BMAC
- Microrrentes
- Estereodinâmica
- Russa
- Iontoporação

ANVISA:10245239025

PHYDIAS

NMS 2402

O Phydias chega para redefinir a eletroestimulação, combinando tecnologia avançada, eficiência e versatilidade. Seu design moderno e interface intuitiva garantem uma experiência única para profissionais da estética e fisioterapia, com tratamentos corporais e faciais que oferecem resultados otimizados e facilidade na aplicação

Equipado com 10 canais de saída, 152 protocolos prontos e um display touch de 7".



10 CANAIS



TRATAMENTOS
CORPORAIS E FACIAIS



PARÂMETROS
AJUSTÁVEIS



EXCLUSIVA
MODULAÇÃO EUTRÓFICA



PROTOCOLOS
PRONTOS

DIFERENCIAIS

Multifuncionalidade: Indicado para tratamentos corporais e faciais, promovendo saúde, beleza e bem-estar.

152 Protocolos prontos: Tratamentos pré-programados para otimizar a rotina profissional.

Exclusiva Modulação Eutrópica: Tecnologia inovadora que potencializa os efeitos da eletroestimulação, promovendo melhor recrutamento de fibras e desempenho muscular.

Protocolos ilustrados com posicionamento de eletrodos: Maior praticidade e precisão na aplicação dos tratamentos.

Display Touch 7": Interface gráfica moderna e intuitiva para manuseio simplificado.

Tratamentos

- ▶ Analgesia
- ▶ Gordura Localizada
- ▶ Eletroacupuntura
- ▶ Cicatrização
- ▶ Introdução de ativos
- ▶ Lipedema
- ▶ Tonificação e Fortalecimento Muscular
- ▶ Drenagem Linfática
- ▶ Aumento da Resistência Muscular
- ▶ Relaxamento Muscular
- ▶ Rejuvenescimento Facial

Correntes

- ▶ Russa
- ▶ BMAC
- ▶ Eletrolipólise
- ▶ Microcorrentes
- ▶ Polarizada
- ▶ Eletroacupuntura

ANVISA:10245230024

HERTIX

RADIOFREQUENCY

THF 1701

O **Hertix Smart Slim** possui a **potência de 140W**, frequências de **640KHz, 1200KHz e 2400KHz**. Possui **9 ponteiros intercambiáveis**, sendo 3 faciais, 4 corporais e 2 para estética íntima.



PROTOCOLOS PRONTOS



ALTA POTÊNCIA



FAZ ESTÉTICA ÍNTIMA



FÁCIL PROGRAMAÇÃO

Ponteiras



Ponteira Bipolar




Ponteira Tripolar




Ponteira Tetrapolar



Ponteira Hexapolar

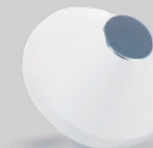

Ponteira Monopolar

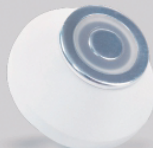

Ponteira Bipolar Concêntrica Pequena



Ponteira Bipolar Concêntrica Grande



Ponteira Íntima 8mm



Ponteira Íntima 15mm



Caneta para Estética Íntima

Estética Íntima

Pensando nos **tratamentos íntimos**, o **Hertix Smart** possui o conceituado e inovador tratamento para região íntima.

Seus **eletrodos autoclaváveis** foram projetados para se adaptar à esta delicada região com segurança e alto rendimento, proporcionando uma pele mais firme e densa.

Indicações

- Aderências e fibroses tardias
- Sequela de Acne
- Rugas e linhas de expressão
- Flacidez cutânea
- Melhora do contorno corporal
- Celulite

Indicações Estética Íntima


- Rejuvenescimento Íntimo
- Flacidez Vulvar
- Elastose
- Pós-parto

ANVISA: 10245239022

AVATAR 40k

TUS - 2440

O **AVATAR 40K** é a mais nova geração em aparelho de ultrassom de baixa frequência, com a **frequência de 40KHZ** foi projetado para tratar camadas adiposas com mais de 3 cm de espessura com resultados superiores e precisão incomparável. Com **80W, a maior potência do mercado**, traz inovação e ergonomia em um único equipamento.

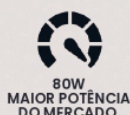

80W
MAIOR POTÊNCIA
DO MERCADO



20 CM²
ERA



PULSO LIVRE
DE 1 A 100 HZ



PROTÓCOLOS
PRONTOS



LEVE E
ERGÔNOMICO

APLICADOR ERGONÔMICO



Pensado para atender às demandas dos profissionais, o novo aplicador ergonômico proporciona um uso mais confortável e eficiente, balanceando o peso para esse tipo de tecnologia. Feito com materiais leves, mas robustos, o aplicador garante durabilidade e manuseio seguro, oferecendo uma experiência otimizada para o usuário.

Indicações

- Gordura Localizada
- Remodelagem corporal

Modos de Aplicação

- Contínuo
- Pulsado (1 a 100 Hz)

Diferenciais

- Pulso livre de 1 a 100Hz
- Potência de 80W
- Leve e ergonômico
- Protocolos prontos
- Display touch intuitiva
- ERA de 20cm²

ANVISA: 10245239021

AVATAR

ESTHETIC

TUS - 2332

O Avatar Esthetic é um aparelho de ultracavitação de última geração, desenvolvido para oferecer tratamentos estéticos altamente eficazes e seguros com tecnologia KLD. Com uma interface touch moderna, design elegante, aplicador ergonômico e as frequências de 950 KHz e 2750 KHz, além do Exclusivo Modo Power Pulse em 40 KHz. É a escolha perfeita para os profissionais mais exigentes.



ALTA
POTÊNCIA



FÁCIL
PROGRAMAÇÃO



DUAS OPÇÕES
DE FREQUÊNCIA



TELA TOUCH
INTUITIVA

APLICADOR MULTIFREQUENCIAL

Adaptabilidade máxima com a capacidade de alternar entre diferentes frequências durante o tratamento, podendo utilizar 950 KHz ou 2750 KHz.



ERA de
10 cm²

Indicações

- Gordura localizada
- Celulite

Modos de aplicação

- Contínuo
- Pulsado (16Hz, 32Hz, 48Hz, 64Hz e 96Hz)

Exclusivo Modo POWER PULSE

Uma tecnologia exclusiva da KLD que modula em 40KHz as frequências de 950 e 2750 KHz, permitindo maior profundidade e amplitude máxima nos tratamentos, garantindo uma eficácia incomparável

ANVISA:10245239016

ARTIX

ECL 2101



Melhor lançamento de Equipamento Corporal
Estética Business Awards 2022

2º lugar - Inovação em Tecnologia Corporal
Beauty Fair

O **Artix**, é um equipamento de criolipólise de placas que traz um conceito tecnológico e científico atualizado para oferecer segurança e liberdade terapêutica para o profissional atingir os melhores resultados em seu paciente.



Aplicador ATP 80

Indicado para tratamentos em regiões menores como a papada e região suprapúbica.

Área efetiva: 54 cm²
Dimensões: 7,7x7,0 cm



Aplicador ATP 120

Indicado para tratamentos em regiões corporais como interno de coxa, bananinha e braços.

Área efetiva: 90 cm²
Dimensões: 11,8x7,7 cm



Aplicador ATP 150

Indicado para tratamentos em regiões corporais mais volumosas como culote, abdômen e flancos.

Área efetiva: 148 cm²
Dimensões: 15,0x9,9 cm



Aplicador ATP 200

Indicado para tratamentos em regiões corporais maiores e mais volumosas como abdômen, flancos e culotes.

Área efetiva: 220 cm²
Dimensões: 19,3x11,4 cm



Aplicador ATP 80D

Indicado para lifting facial, ele estimula a produção de colágeno, promovendo firmeza e rejuvenescimento. Além disso, atua de forma eficaz na redução de gordura localizada, proporcionando resultados visíveis em poucas sessões.

Área efetiva: 30 cm²



Exclusivo Sistema Criolock

Ele é o **único** no mercado que possui o **exclusivo sistema CRIOLOCK** que permite o posicionamento de **360°** da placa garantindo maior estabilidade e menos deslizamento, tornando a aplicação mais **segura e efetiva**.

Indicações

- Gordura Localizada
- Pré-operatório
- Hidrolipoclasia
- Celulite Graus I, II e III
- Remodelagem corporal

Modos de Operação

- Convencional
- Pós-aquecido
- Pré-aquecido
- Pré e pós aquecido
- Multithermo Cold
- Multithermo Heat

ANVISA:10245239018

PLASMAX

EHF 2204

O **Plasmax** conta com a poderosa tecnologia de **Jato de Plasma KLD**, trazendo a incrível potência de 3W para uma versão portátil, leve, ergonômica e totalmente sem fio, pensando no conforto e praticidade para os atendimentos.

Um design pensado para que o profissional obtenha a **máxima precisão** e **controle sobre a aplicação**. Ideal para tratar rugas, manchas, estrias, cicatrizes e lesões da pele sem invasão cirúrgica, oferecendo resultados duradouros e naturais.



LEVE E PORTÁTIL



TOTALMENTE SEM FIO



CONTROLE DE DOSE EM mW



DESIGN ERGONÔMICO



POTÊNCIA DE 3W

Indicações

- Rugas
- Flacidez palpebral
- Melanose solar
- Cicatrizes traumáticas
- Reparação tecidual
- Hiperpigmentação
- Rejuvenescimento
- Cicatrizes de acne
- Manchas senis
- Estrias
- Remoção de lesão benigna
- Xantelasma



Suporte para Agulha

Destina-se à utilização para a fulguração com agulhas de uso único.



Ponteira Cônica

Também utilizada para fazer a fulguração, mas gera uma concentração de energia levemente menor do que a agulha.



Ponteira Esférica

Destina-se à técnica de aplicação de contato em áreas mais delicadas como a área dos olhos.



Ponteira Disco 10mm

Destina-se à técnica de aplicação de contato em áreas mais planas, como a região da testa.



Ponteira Disco 20mm

Destina-se à técnica de aplicação de contato em áreas maiores, como a região do colo e do pescoço.

Modos de aplicação



Modo Pulsado

INDICADO PARA TÉCNICA DE FULGURAÇÃO POR VARREDURA.

As opções de frequência de pulso são: 10Hz, 5Hz, 2,5Hz, 1,7 Hz, 1,2 Hz, 1Hz e 0,8 Hz



Modo One Shot

INDICADO PARA TÉCNICA DE FULGURAÇÃO PONTUAL.

Cada ponto terá a duração selecionada no shot. As opções são: 0,1s/ 0,2s/ 0,3s/ 0,4s/ 0,5s e 0,6s.



Modo Contínuo

INDICADO PARA TÉCNICA DE FULGURAÇÃO PONTUAL.

O tempo de emissão do plasma por ponto de aplicação deve ser controlado pelo profissional.



Plasmaporação

INDICADO PARA TÉCNICA DE CONTATO.

Para a aplicação da plasmaporação, a intensidade já está fixa no equipamento e não pode ser alterada.

ANVISA:10245239017

VACUO

HYGIADERMO

EVT 2211

O equipamento de vacuoterapia mais **moderno, leve e versátil** do mercado, possuindo controle funcional de pressão e a **mangueira mais flexível** da categoria.



MODERNO E TECNOLÓGICO



MANGUEIRA FLEXÍVEL



LEVE E COMPACTO



ÚNICO COM INDICADOR DE PRESSÃO DIGITAL

Ponteiras Corporais



Aplicador Rolete 50mm



Aplicador Rolete 60mm



Aplicador Ventosa com esferas

Ponteiras Faciais



Kit ventosas faciais

Modos de aplicação



Modo Contínuo



Modo Pulsado



Modo Peeling



Modo PUMP MAX

Entre todos os seus modos disponíveis, o **Hygiadermo Vacuo** possui o exclusivo modo **PUMP MAX**, permitindo **precisão no controle da pressão** durante o tratamento.

Indicações

- Gordura localizada
- Cicatrizes
- Aderências
- Fibroses
- Celulite
- Remodelagem Corporal
- Alopecias
- Pré-operatório
- Pós-operatório
- Estrias

ANVISA:10245239019

PHASYS

NMS 2114

O **Phasys** é o equipamento **multicorrentes** de 8 canais mais completo, avançado e excelente quando se pensa em tecnologia e resultado. Permite realizar uma grande variedade de tratamentos corporais e faciais devido às suas **13 opções de correntes** elétricas e acessórios exclusivos que acompanham o equipamento.



MAIOR QUANTIDADE DE CORRENTES



TRATAMENTOS CORPORAIS E FACIAIS



PARÂMETROS AJUSTÁVEIS



EXCLUSIVA MODULAÇÃO EUTRÓFICA



PROTOCOLOS PRONTOS

Acessórios exclusivos para estética facial

Kit exclusivo para tratamentos faciais e corporais como rejuvenescimento, tonificação, rugas, terapia capilar, cicatrizes e estrias.



Exclusiva Modulação Eutrófica®

A exclusiva **Modulação Eutrófica®** deriva do conceito de estimulação eutrófica, que reproduz o padrão de contração e relaxamento do músculo. A KLD desenvolveu essa modulação com objetivo de aumentar o recrutamento das fibras, visando estimulação equilibrada, diminuição da fadiga e aumento da performance muscular.

Indicações

- Analgesia
- Fortalecimento Muscular
- Gordura Localizada
- Eletroacupuntura
- Permeação de ativos
- Desincruste
- Drenagem Linfática
- Eletrolifting

Correntes

- TENS
- Eletroacupuntura
- Russa
- BMAC
- BMAC Motora
- BMAC Sensorial
- Desincruste
- Eletrodrenagem
- Microcorrente
- Iontoforese
- Eletrolifting
- Eletrolipólise
- Translipólise

ANVISA: 10245239009

ASCUA

LIP 1403

O **Ascu** é um equipamento de **Luz Pulsada** que conta com um aplicador de **7,5 cm²** para otimizar a prática clínica e a vida útil da lâmpada. E para proporcionar maior conforto, sua ponteira é refrigerada à água. Ele possui **8 filtros**, permitindo assim personalizar seus tratamentos.



PONTEIRA REFRIGERADA



MAIOR POTÊNCIA DO MERCADO



ÚNICO COM VALIDADOR DE PULSO

8

FILTROS ÓPTICOS INTERCAMBIÁVEIS

Filtros Ópticos

8 filtros ópticos intercambiáveis que variam de **430nm** a **750nm**.




Aplicador

O Ascu possui o aplicador com **MAIOR SPOTSIZE** do mercado, com seus incríveis **7,5cm²**



7,5cm²

Interface Gráfica

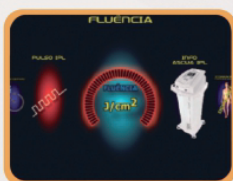

Parâmetros ajustáveis



Ajuste de intensidade da refrigeração da ponteira.

Potência

Possuindo a **MAIOR POTÊNCIA** do mercado, o Ascu conta com **300J** de potência total.

Indicações

- Redução de pelos
- Acne grau 1 e 2
- Rosácea
- Fotorejuvenescimento cutâneo
- Discromias
- Telangiectasias
- Terapia fotodinâmica

ANVISA: 10245239014

— H Y G I A — PLASMA

EHF 1714

Potência e Precisão em um único equipamento de **Jato de Plasma**. Conta com uma potência de **3W** e **4 modos de aplicação**: contínuo, one shot, pulsado e plasmaporação.



MAIOR POTÊNCIA DO MERCADO



AJUSTE DA DOSE NO APLICADOR



APLICADOR ULTRA LEVE



PRECISÃO MÁXIMA NA APLICAÇÃO

Ponteiras



Ponteira Cônica

Utilizada para fulguração. Concentração de energia levemente menor do que a agulha.



Ponteira Reta

Utilizada para fulguração. Maior diâmetro.




Ponteira Esférica

Utilizada para a aplicação de contato.



Suporte Agulha

Utilizada para fulguração com agulhas de uso único. Menor diâmetro.

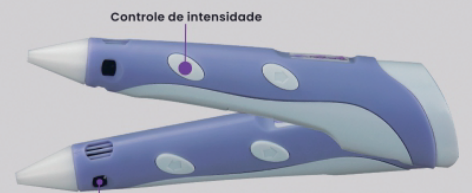

Controle de intensidade

Acionamento do Plasma

Caneta aplicadora

Indicações

- Acne ativa
- Remoção de xantelasmas
- Flacidez palpebral
- Cicatrizes de acne
- Remoção de ceratoses
- Rejuvenescimento

Modos de aplicação



Modo Pulsado

INDICADO PARA TÉCNICA DE FULGURAÇÃO POR VARREDURA

As opções de frequência de pulso são: 10Hz, 5Hz, 2,5Hz, 1,7 Hz, 1,2 Hz, 1Hz e 0,8 Hz



Modo One Shot

INDICADO PARA TÉCNICA DE FULGURAÇÃO PONTUAL

Cada ponto terá a duração selecionada no shot. As opções são: 0,1s/ 0,2s/ 0,3s/ 0,4s/ 0,5s e 0,8s.



Modo Contínuo

INDICADO PARA TÉCNICA DE FULGURAÇÃO PONTUAL

O tempo de emissão do plasma por ponto de aplicação deve ser controlado pelo profissional.



Plasmaporação

INDICADO PARA TÉCNICA DE CONTATO

Para a aplicação do plasmaporação, a intensidade já está fixa no equipamento e não pode ser alterada.

ANVISA:10245239015

KAVYS

TUS 1901

O **Kavys** revolucionou o conceito de **ultracavitação**, devido a sua potência de 72W e seu exclusivo sistema **Convex Triple Probe®** em seus 3 emissores.



POTÊNCIA DE 72W



APLICADOR LEVE
E ERGONÔMICO



3 EMISSORES DE
ULTRACAVITAÇÃO

2

2 FREQUÊNCIAS
950KHz e 2750KHz

Ponteiras

Permitindo tratar qualquer espessura de adiposidade com uma agilidade nas aplicações, o **Kavys** conta com 2 probes intercambiáveis.

950Khz

Para camadas mais espessas.



2.750Khz

Para camadas adiposas menores.

Indicações

- Gordura Localizada
- Remodelagem Corporal
- Pré-Operatório
- Celulites graus I, II e III
- Hidrolipoclasia

Equalização automática

O exclusivo sistema **Convex Triple Probe** faz o monitoramento automático dos 3 emissores cavitacionais de alta potência para que permaneçam trabalhando **simultaneamente**.



ENDOPHOTON

LLT 1307

O **Endophoton** é um equipamento de **fototerapia** que possibilita ao profissional os tratamentos com laser de baixa potência e LED's. Com diferentes opções de clusters, o profissional pode escolher o que melhor se adapta a sua rotina e tratamentos.



MODO ILIB



TOPOSCÓPIO



VARIEDADE DE APLICADORES



CLUSTER LEDS E LASER


Aplicadores




LED Infravermelho
- 858nm
- 600mW




LED Azul
- 470nm
- 360mW

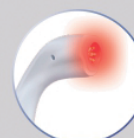


LED Vermelho
- 658nm
- 480mW

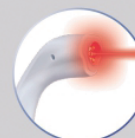

Laser Vermelho + LED Vermelho e Infravermelho
- Laser 660nm|50mW
- LED 658nm|4x40mW
- LED 858nm|4x50mW
Total - 410mW

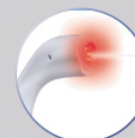

Laser Infravermelho + LED Vermelho e Infravermelho
- Laser 904nm|50mW
- LED 658nm|4x40mW
- LED 858nm|4x50mW
Total - 410mW

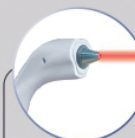

Laser Vermelho
- 660nm
- 100mW



LASER Infravermelho
- 904nm
- 70mW

Fisioterapia

Combinações

•Endophoton Esthetic

- LED Azul
- LED Vermelho
- LED Infravermelho

•Endophoton Multi

- LED Azul
- LED Vermelho
- LED Infravermelho
- CLUSTER Laser Vermelho + LED Vermelho e Infravermelho
- CLUSTER Laser Infravermelho + LED Vermelho e Infravermelho

•Endophoton Plus

- LED Azul
- CLUSTER Laser Vermelho + LED Vermelho e Infravermelho
- CLUSTER Laser Infravermelho + LED Vermelho e Infravermelho

• Combo ILIB

- Pulseira ILIB
- CLUSTER Laser Vermelho + LED Vermelho e Infravermelho

Indicações

•Estética

- Reparo tecidual
- Rejuvenescimento
- Acne
- Discromias
- Alopecia

• Fisioterapia

- Úlceras
- Neuropatias
- Pós-Operatório
- Algias
- Edemas

Modo ILIB

A sigla ILIB tem origem na língua inglesa *intravascular light irradiation of blood* e significa irradiação luminosa sanguínea. O uso dessa tecnologia resulta em efeitos biológicos sistêmicos.

Pulseira ILIB

Opcional, vendida separadamente.



ANVISA: 10245230024

HERTIX

CRYOGENIC RADIOFREQUENCY

THF 1703



Melhor lançamento de Equipamento Corporal
Estética Business Awards 2019

O **Hertix Crio** é uma plataforma de multitratamentos, que possibilita a aplicação de criofrequência (calor+frio), radiofrequência convencional (calor), criogenia (frio) e alta frequência.



ALTA
POTÊNCIA



FÁCIL
PROGRAMAÇÃO



VÁRIAS OPÇÕES
DE FREQUÊNCIA



RADIO E CRIO NO
MESMO APLICADOR

Ponteiras

O **Hertix Crio** possui 2 aplicadores de **criofrequência** e diversos outros opcionais de **radiofrequência**.



Ponteira Bipolar



Ponteiras para
estética íntima



Ponteira Smartpolar

Indicações

- Flacidez Cutânea ◦ Cicatriz de acne
- Celulite ◦ Rugas e linhas de expressão
- Aderências e fibroses tardias
- Melhora o contorno corporal

Estética Íntima

Pensando nos **tratamentos íntimos**, o **Hertix Smart** possui o conceituado e inovador tratamento para região íntima.

Seus **eletrodos autoclaváveis** foram projetados para se adaptar à esta delicada região com segurança e alto rendimento, proporcionando uma pele mais firme e densa.

Funcionamento da Ponteira Smartpolar



Hexapolar

Circulação de energia
entre os polos



Monopolar

Circulação de energia
entre o polo central e o
eletrodo dispersivo



Multipolar

Circulação de energia
entre todos os polos e o
eletrodo dispersivo

Opções de equipamento

A KLD oferece duas opções de compra, você pode escolher a melhor para sua Clínica.

HERTIX COMPLETO



Ponteira Bipolar



Ponteira Smartpolar



Ponteiras para
estética íntima



KIT com aplicador + 7 ponteiros
intercambiáveis para
radiofrequência



KIT com aplicador +
6 eletrodos para alta
frequência

HERTIX BÁSICO



Ponteira Bipolar



Ponteira Smartpolar



Ponteiras para
estética íntima

ANVISA: 10245239012

HYGIALUX

LLT 1601

O **Hygialux** é um equipamento de **fototerapia** com laser de baixa potência e LED's. Com diferentes opções de clusters, painéis e ampla gama de comprimentos de onda.



LED DE ALTA INTENSIDADE



LASER DE ALTA POTÊNCIA



DISPLAY GRÁFICO COM FÁCIL PROGRAMAÇÃO



PLUG DE CONEXÃO RÁPIDA

Modos de operação



Multicolor

Emissão de até 3 cores simultâneas, sequências ou independentes.



Energia

Possibilita o ajuste por tempo, energia ou fluência.

Indicações na estética

- Rejuvenescimento
- Acne
- Dermatites
- Onicocriptose
- Discromias
- Pós-operatório
- Efeito bactericida
- Manchas
- Alopecias e tratamento capilar
- Terapia fotodinâmica
- Cicatrização de feridas
- Reparação tecidual
- Analgesia
- Onicomicose
- Psoríase
- Vitiligo
- Rosácea
- Queimaduras

Indicações na fisioterapia

- Analgesia
- Artrite
- Artroses
- Fibromialgia
- Osteoartrose
- Lesão muscular
- Tendinoplastia
- Epicondilite
- Psoríase
- Lúpus
- Vitiligo
- Reparação tecidual
- Terapia fotodinâmica
- Cicatrização de feridas
- Onicomicose
- Analgesia
- Rosácea

Modo ILIB

Além de todas as indicações de fisioterapia e estética com seus painéis e clusters, ainda possui o modo **ILIB**. Mais um super diferencial do **Hygialux**.

Aplicadores

Aplicadores de Laser para Fisioterapia



Caneta Laser Vermelho
- 660 nm
- 180 mW



Caneta Laser Infravermelho
- 808 nm
- 200 mW



Aplicadores Cluster - LED Tricolor



Tricolor Vermelho/Azul/Infravermelho
- 112 LEDs
- 630, 470 e 850nm
- 60 cm²
- 4.625 mW



Tricolor Âmbar/Azul/Infravermelho
- 112 LEDs
- 590, 470 e 850nm
- 60 cm²
- 3.885 mW




Tricolor Âmbar/Azul/Vermelho
- 112 LEDs
- 590, 470 e 630nm
- 60 cm²
- 3.330 mW

Aplicadores com emissão independente, sequencial ou simultânea


Aplicadores Cluster - LED monocromático




LED Azul
- 112 leds
- 470 nm
- 60 cm²
- 3.360 mW

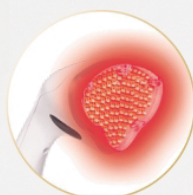


LED Vermelho
- 112 leds
- 630 nm
- 60 cm²
- 4.480 mW

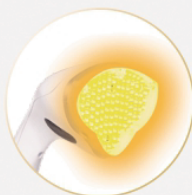

LED Âmbar
- 112 leds
- 590 nm
- 60 cm²
- 2.240 mW

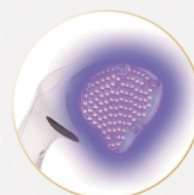

LED Ultravioleta
- 112 leds
- 390 nm
- 60 cm²
- 784 mW

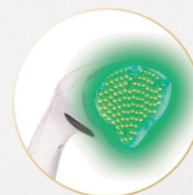

LED Verde
- 112 leds
- 530 nm
- 60 cm²
- 1.120 mW

Aplicadores para técnica ILIB



Caneta Laser Vermelho
- 660nm
- 180 mW



LED Azul
- 8 LEDs
- 470nm
- 240 mW
Laser vermelho
- 1 Laser
- 660nm
- 180 mW
Total: 420 mW



Pulseira ILIB
Acessório opcional

Exclusivo Painel 3 Abas

Os painéis do HYGIALUX otimizam o tempo das sessões e oferecem resultados incríveis.



Led Vermelho
- 1176 LEDs
- 630nm
- 480 cm²
- 47.040 mW



Painel Tricolor
- 1260 LEDs
- 470, 630 e 850nm
- 480 cm²
- 52.500 mW



Aplicadores com emissão independente, sequencial ou simultânea

ANVISA:10245239021

AVATAR

DUO
TUS 2331

O **Avatar Duo** é um aparelho de ultrassom mais potente do mercado, 30 W, projetado para revolucionar a fisioterapia. Com duas **frequências de 1 e 3 MHz**, display touch intuitiva e um design moderno, o Avatar Duo oferece precisão e eficácia inigualáveis. Além disso, conta com o **exclusivo modo Power Pulse (modulação em 40 KHz)** resultados superiores em tratamentos.



POTÊNCIA DE
30W



FREQUÊNCIAS DE
ULTRASSOM



EXCLUSIVO
MODO POWER PULSE



PROTOCOLOS
PRÉ-PROGRAMADOS



DISPLAY TOUCH
INTUITIVO

APLICADOR MULTIFREQUENCIAL

Adaptabilidade máxima com a capacidade de alternar entre diferentes frequências durante o tratamento, podendo utilizar 1 MHz ou 3 MHz.



ERA de
10 cm²
30W

Exclusivo Modo Power Pulse

Uma tecnologia exclusiva da KLD que modula em 40KHz as frequências de 1 e 3 MHz, permitindo maior profundidade e amplitude máxima nos tratamentos, garantindo uma eficácia incomparável

Indicações

- Recovery
- Reabilitação
- Disfunções Musculoesqueléticas

Modos de aplicação

- Contínuo
- Pulsado (16Hz, 32Hz, 48Hz, 64Hz e 96Hz)

PHASYS

NMS 2113

O **Phasys 2113** é um equipamento que revoluciona o conceito de **multicorrentes**. Sua moderna tecnologia garante precisão, agilidade e resultado no atendimento.

Equipado com **correntes de fortalecimento muscular, antiinflamatórias e analgésicas** proporciona tratamentos nas mais diversas áreas da Fisioterapia.



MAIOR QUANTIDADE DE CORRENTES



TRATAMENTOS CORPORAIS E FACIAIS



PARÂMETROS AJUSTÁVEIS



EXCLUSIVA MODULAÇÃO EUTRÓFICA



PROTÓCOLOS PRONTOS


ACESSÓRIOS



16 ELETRODOS 5X5 CM



CABO SAÍDA 4 ELETRODOS

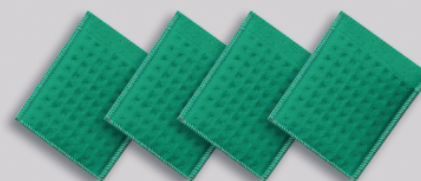

4 ENVELOPE PARA ELETRODO 5X5 CM



4 CINTA ELÁSTICA 60CM

Exclusiva Modulação Eutrófica®

A exclusiva **Modulação Eutrófica®** deriva do conceito de estimulação eutrófica, que reproduz o padrão de contração e relaxamento do músculo. A KLD desenvolveu essa modulação com objetivo de aumentar o recrutamento das fibras, visando estimulação equilibrada, diminuição da fadiga e aumento da performance muscular.

Correntes

- TENS ➤ Eletroacupuntura ➤ Russa ➤ Eletrodrenagem ➤ Microcorrente ➤ Desincruste ➤ Eletrolifting ➤ FES
- BMAC ➤ BMAC Motora ➤ BMAC Sensorial ➤ Iontoforese ➤ Eletrolipólise ➤ Translipólise ➤ INTERF Tretapolar
- DIAD Bernard LP ➤ DIAD Bernard DF ➤ DIAD Bernard MF ➤ DIAD Bernard CPid ➤ Diadinâmica Sequencial
- TENS Assimétrico ➤ TENS Assim Alter ➤ TENS Simétrico ➤ Galvânica ➤ INTERF Bipolar ➤ ULTRA EX trabert
- BURST Assimétrico ➤ BURST ASSIM ALTERN ➤ BURST ASSIM ALTERN

Indicações

- Analgesia ➤ Fortalecimento Muscular
- Síndrome Miofasciais ➤ Neuralgia pós-herpética
- Reabilitação Muscular ➤ Relaxamento muscular
- Dor de origem neurogênicas ➤ Dores Lombares



 (27) 99981-1054

  centrotecnicovidativa

 www.vidativa.com.br

Centro Técnico Vidativa

Av. Champagnat, 645, Sala 101, Ed. Palmares - Vila Velha,
Praia da Costa - ES. CEP: 29101-370